




prokaire  
air therapy



wellness

machine  
Luxury

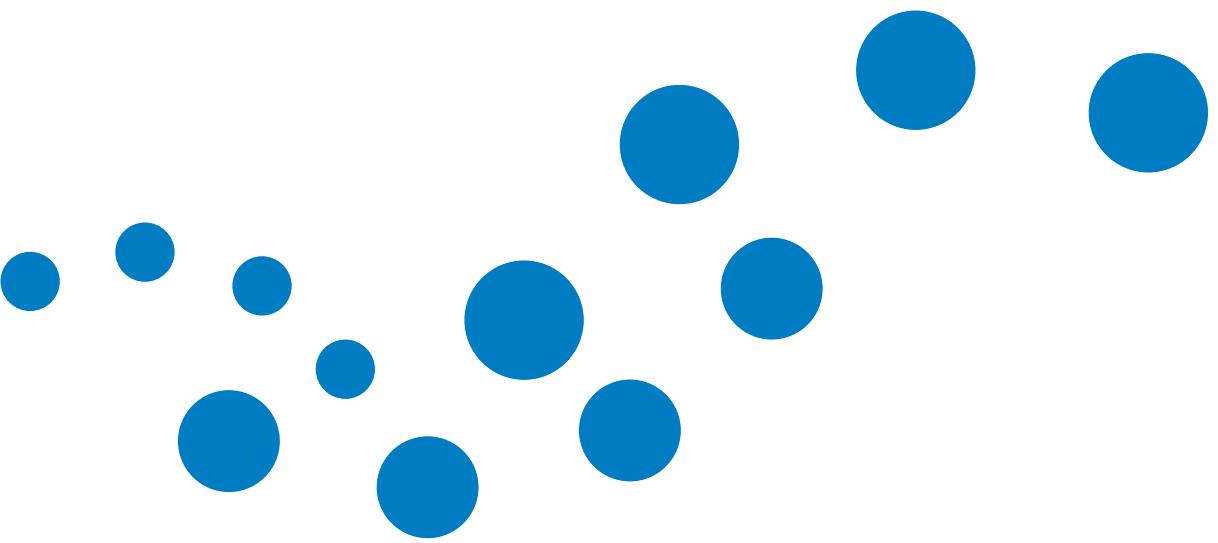



## PROKAIRE FOR BODY

- 3 - How Prokaire functions
- 7 - Prokaire Body Benefits
- 8 - Prokaire: Effects on the body
- 9 - How Prokaire works on the body
- 11 - Effects on the Microcircle
- 12 - Body Effects: Epidermis and dermis
- 13 - Body Effects: Hypoderm and muscular masses

## 14 - PROKAIRE FOR THE MIND

- 17 - Rhythm-therapy of the air flow
- 18 - Chromotherapy and the air flow
- 20 - Air Flow massage and Aromatherapy
- 22 - Air flow massage and Music therapy

## 24 - PROKAIRE PROBE | Low Frequency

- 27 - Prokaire Probe – Air and Nebulization
- 28 - Prokaire Probe - Oriental Air and Medicine

## 30 - PROGRAMS PROKAIRE

- 32 - Relaxing | Stimulating | Firmino | Fisio
- 33 - Draining | Boosting | Slimming | Balancing

## 34 - PROKAIRE 5 SENSES

- 35 - View | Olfaction | Tact | Hearing | Taste

## 36 - PROKAIRE ESSENTIAL OILS

- 38 - TAB TECHNIQUE PROKAIRE

## PROKAIRE PER IL CORPO

- 3 - Come funziona Prokaire
- 7 - Benefici Prokaire per il corpo
- 8 - Prokaire: Effetti sul corpo
- 9 - Come agisce sul corpo Prokaire
- 11 - Effetti sul Microcircolo
- 12 - Effetti sul corpo: Epidermide e derma
- 13 - Effetti sul corpo: Ipoderma e masse Muscolari

## 14 - PROKAIRE PER LA MENTE

- 17 - Ritmoterapia del flusso d'Aria
- 18 - Cromoterapia e flusso d'Aria
- 20 - Aromaterapia e flusso d'Aria
- 22 - Musicoterapia e flusso d'Aria

## 24 - MANIPOLO PROKAIRE | Low Frequency

- 27 - Manipolo Prokaire - Aria e Nebulizzazione
- 28 - Manipolo Prokaire - Aria e Medicina Orientale



Lasciati Andare  
nell'Aria



prokairé  
air therapy

PROMOITALIA  
WELLNESS RESEARCH

# How Prokaire functions

Come funziona Prokaire

ProKaire has the ability to convey energy in the form of compressed air liberating the latter instantaneously. In this manner, the epidermis is stimulated by the shock waves, generating a dinamization of the cellular processes.

The air flow generated by the rapid opening and closure of the valves, in the order of thousandths of seconds, powered by high pressure pneumatic circuits, produces a vehiculating force able to transport high tech active principles inside the body.

*ProKaire ha la capacità di convogliare energia sotto forma d'aria compressa liberandola istantaneamente. L'epidermide viene in questo modo sollecitata dalle onde d'urto, generando una dinamizzazione dei processi cellulari. Il flusso d'aria generato dalla rapida apertura e chiusura delle valvole, nell'ordine di millesimi di secondi, alimentate da circuiti pneumatici ad alta pressione, produce una forza veicolante, non invasiva, in grado di trasportare all'interno del corpo principi attivi di alta tecnologia.*





**prokaire**  
air therapy

Lasciati Massaggiare  
**dall'aria**

*the first machine in the world  
capable of firming the body  
with the air*

 **PROMOITALIA**  
WELLNESS RESEARCH

# Prokaire Body Benefits

*Benefici Prokaire per il corpo*

- Hyper-oxygenation
- Moisturizing
- Tonification
- Draining Effect
- Hyper-vascularization



# Prokaire: Effects on the body

*Prokaire: Effetti sul corpo*

- Reduction of the falling edema
- Microcircle improvement
- Improvement of the skin's aspect
- Synergic action that relaxes the body and mind



- *Riduzione degli Edemi declivi*
- *Miglioramento del Microcircolo*
- *Miglioramento dell'aspetto della pelle*
- *Azione sinergica rilassante mente-corpo*

# How Prokaire works on the body


*Come agisce sul corpo Prokaire*

The high pressure air flow, emitted by Prokaire by slow and rhythmical waves: increases tissue oxygenation, realizes a sweet and rhythmic massage (Lymphodrenaggio) favorites the elimination of body liquid stagnation, reactivates the cellular function.

All of this is realized thanks to an accurate technology and thanks to a computerized program that guarantees the precision of the consecutiveness and intensity of the air flow.

*Il flusso d'Aria ad alta pressione, emesso da Prokaire ad onde lente e ritmate: incrementa l'ossigenazione dei tessuti, realizza un massaggio dolce e ritmato (Linfodrenaggio) favorisce l'eliminazione del ristagno dei liquidi corporei, riattiva la funzionalità cellulare.*

*Tutto ciò è realizzato grazie ad una sofisticata tecnologia e ad un programma computerizzato che garantisce l'accuratezza della sequenzialità e dell'intensità del flusso d'aria.*

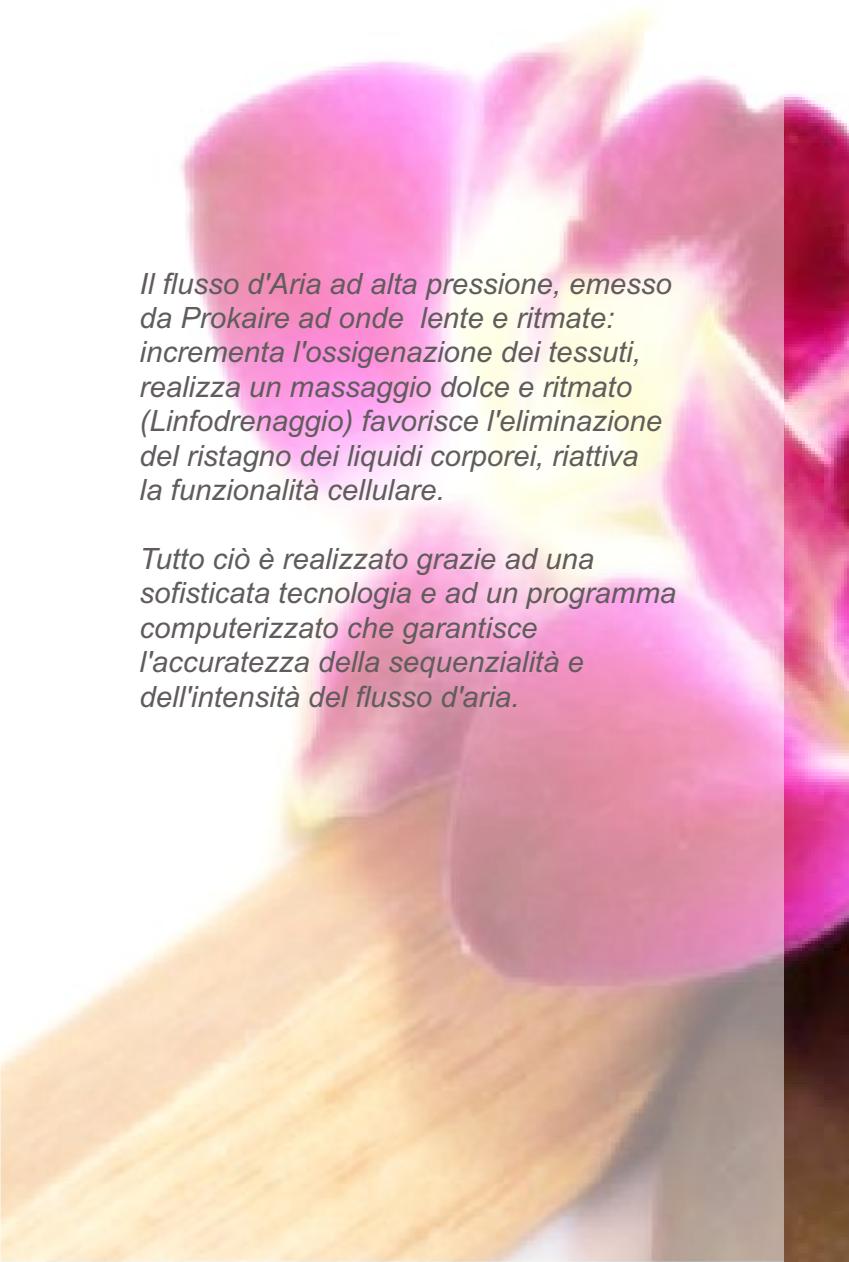

# the air caress

lasciati accarezzare dall'aria

*“the first machine in the world  
capable of improve the microcircle  
with the air”*

 prokaire  
air therapy


# Effects on the Microcircle

## *Effetti sul Microcircolo*



The technology found in Prokaire, besides modulating the intensity of the air flow and the rhythm, also allows that of the temperature, in this manner generating a thermal gradient that realizes the increase of temperature by controlled and controllable modalities, with the consequential “dramatic” improvement of the microcircle.

*La tecnologia presente in Prokaire oltre alla modulazione dell'intensità del flusso d'aria e del ritmo, permette anche quella della temperatura generando in tal modo un gradiente termico che realizza l'incremento di temperatura con modalità controllate e controllabili, con il conseguente "drammatico" miglioramento del microcircolo.*

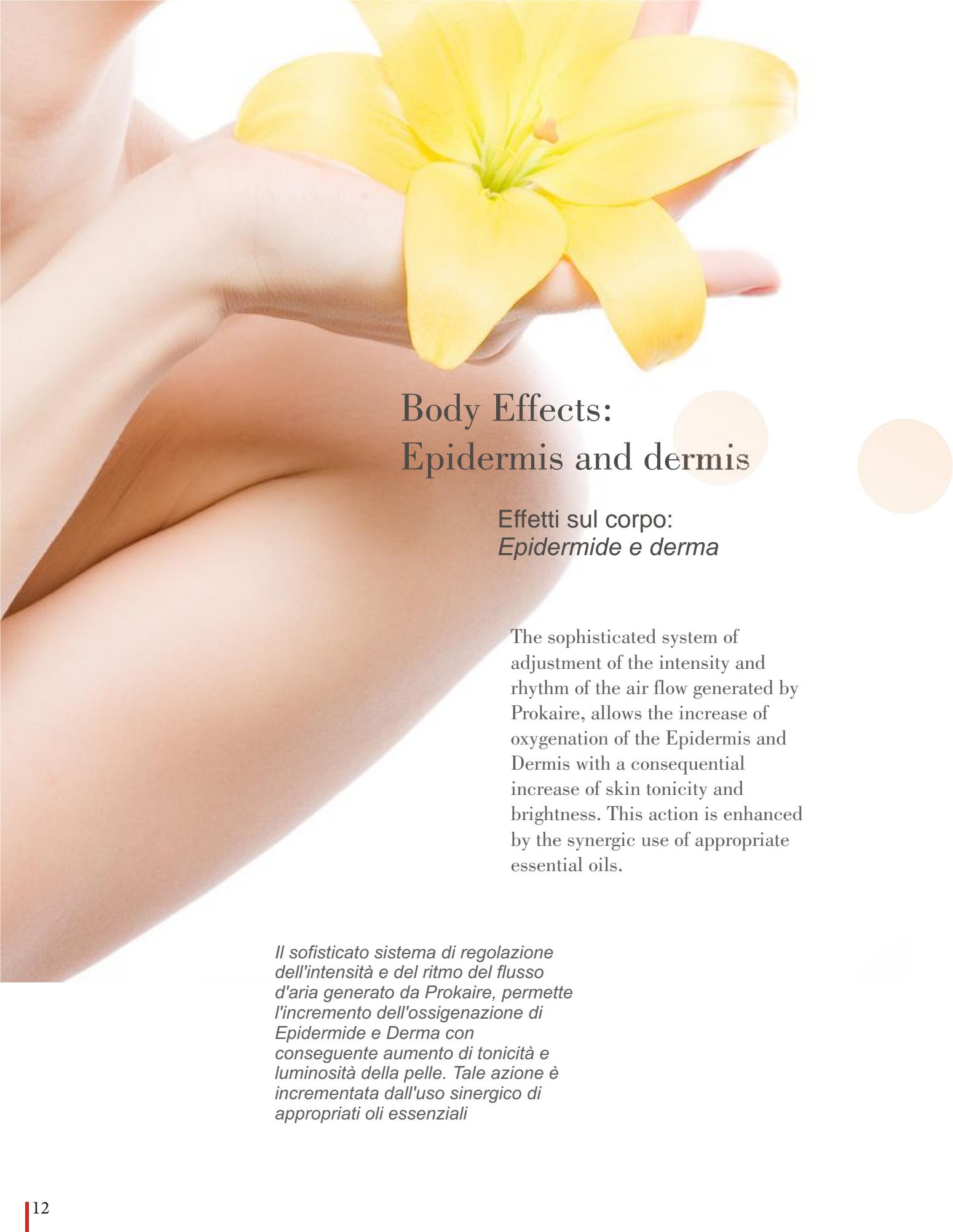

## Body Effects: Epidermis and dermis

Effetti sul corpo:  
*Epidermide e derma*

The sophisticated system of adjustment of the intensity and rhythm of the air flow generated by Prokaire, allows the increase of oxygenation of the Epidermis and Dermis with a consequential increase of skin tonicity and brightness. This action is enhanced by the synergic use of appropriate essential oils.

*Il sofisticato sistema di regolazione dell'intensità e del ritmo del flusso d'aria generato da Prokaire, permette l'incremento dell'ossigenazione di Epidermide e Derma con conseguente aumento di tonicità e luminosità della pelle. Tale azione è incrementata dall'uso sinergico di appropriati oli essenziali*

# Body Effects: Hypoderm and muscular masses

Effetti sul corpo:  
*Ipoderma e masse Muscolari*

The possibility to adjust the air flow emitted by Prokaire allows the realization of an efficient massage on the entire area, from the surface of the epidermis up to the muscular area.

This consents a form of intense relaxation, and an improvement of the intracellular exchanges, not only at the muscular level, but also at the dermis and hypodermis layers, with a consequential improvement of the beauty flaws of cellulite and tissue tonification.

*La possibilità di regolazione del flusso dell'Aria emessa da Prokaire consente la realizzazione di un efficace massaggio a tutto spessore, dalla superficie dell'epidermide fino alle fasce muscolari*

*Ciò permette una forma di rilassamento intensa, con miglioramento degli scambi intercellulari, non solo a livello muscolare, ma anche degli strati dermici ed ipodermici, con conseguente miglioramento degli inestetismi della cellulite e ritonificazione tissutale.*





**prokaire**  
air therapy

*open the doors...*

 **PROMOITALIA**  
WELLNESS RESEARCH


***PROKAIRO** is....  
for the MIND*

*PROKAIRO è  
per la MENTE*

Rhythm-therapy of the air  
Chromotherapy  
Music therapy  
Aromatherapy

*Ritmoterapia dell'aria  
Cromoterapia  
Musicoterapica  
Aromoterapia*



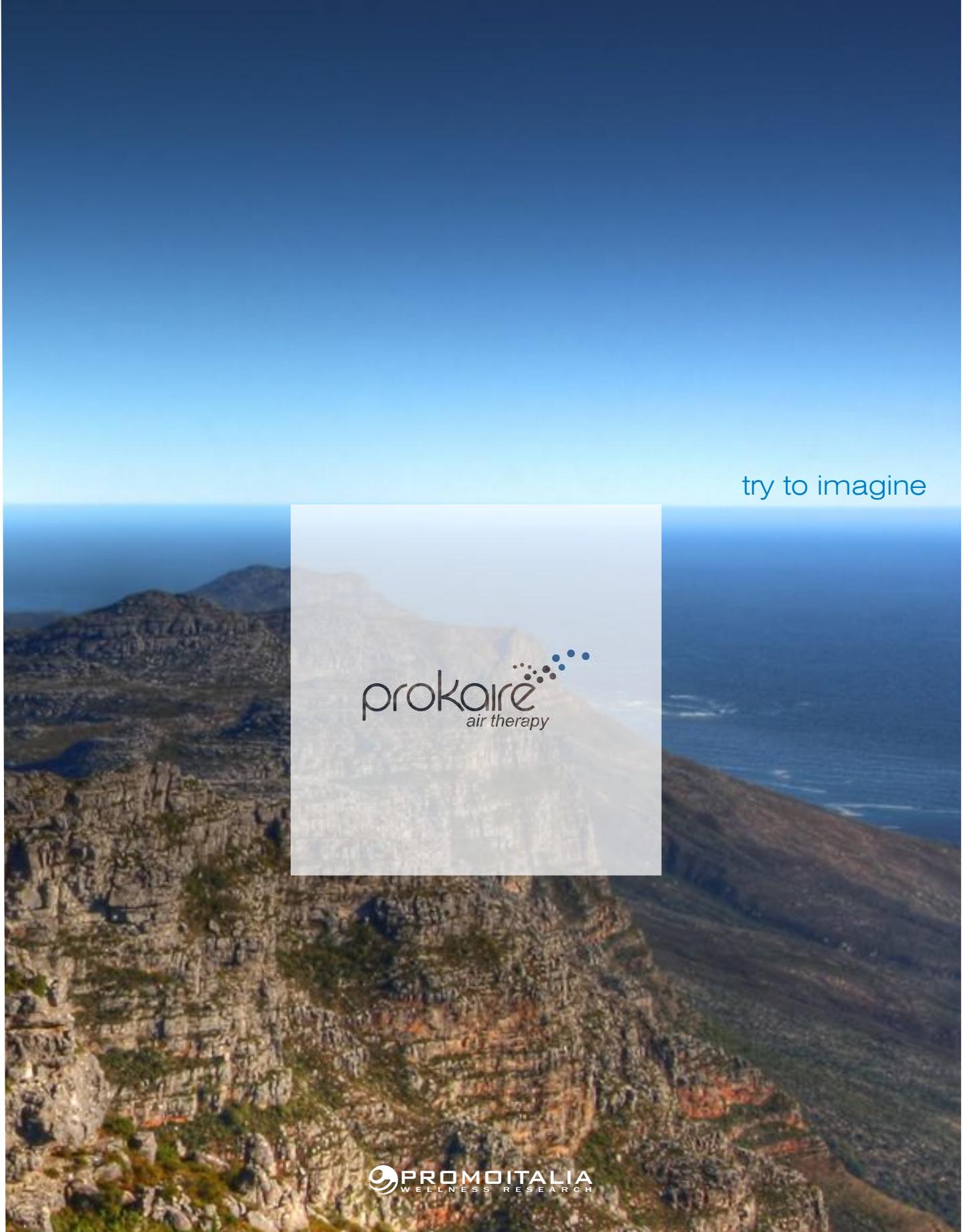

try to imagine

prokaire  
air therapy

PROMOITALIA  
WELLNESS RESEARCH

# Rhythm-therapy of the air flow

## *Ritmoterapia del flusso d'Aria*

Rhythm-therapy is known as movement therapy. The rhythmical uniqueness of the programs of this device is able to synthesize both with the music as well as with the body movements, consciously or unconsciously. This permits the rhythms generated by Prokaire to generate a deep relaxation and an intense wellness in harmony with the body rhythms.


*La ritmoterapia è detta terapia del movimento. L'unicità ritmica dei programmi di questa macchina è in grado di sintetizzarsi sia con la musica che con i movimenti corporei, consapevoli o incansapevoli. Questo fa sì che i ritmi generati da Prokaire generino in sintonia con i ritmi corporei un profondo rilassamento e un intenso benessere.*

### The 5 Prokaire rhythms

The vertical lines indicate the scanning of the bang (sound of the air) in time, indicated in milliseconds

### I 5 Ritmi Prokaire

*Le linee verticali, stanno ad indicare la scansione del bang (suono dell'aria) nel tempo, indicato in millisecondi*

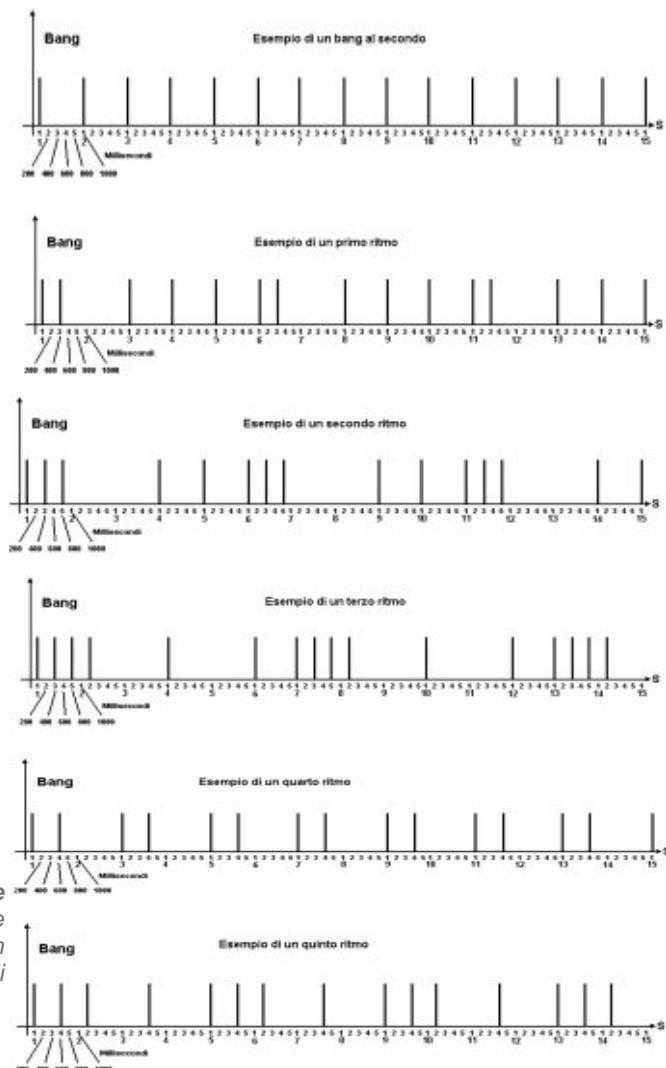

# Chromotherapy and the air flow


*Cromoterapia e flusso d'Aria*

The colors may predispose at the finding of a natural balance between psyche and body.

Prokaire relates color and massage to the air flow in order to generate the stimulation of specific cerebral areas able to induce deep relaxation.

*I colori possono predisporre al ritrovamento di un naturale equilibrio fra psiche e soma.*

*Prokaire relaziona colore e massaggio a flusso d'Aria in modo tale da generare la stimolazione di specifiche aree cerebrali in grado di indurre profondo relax.*

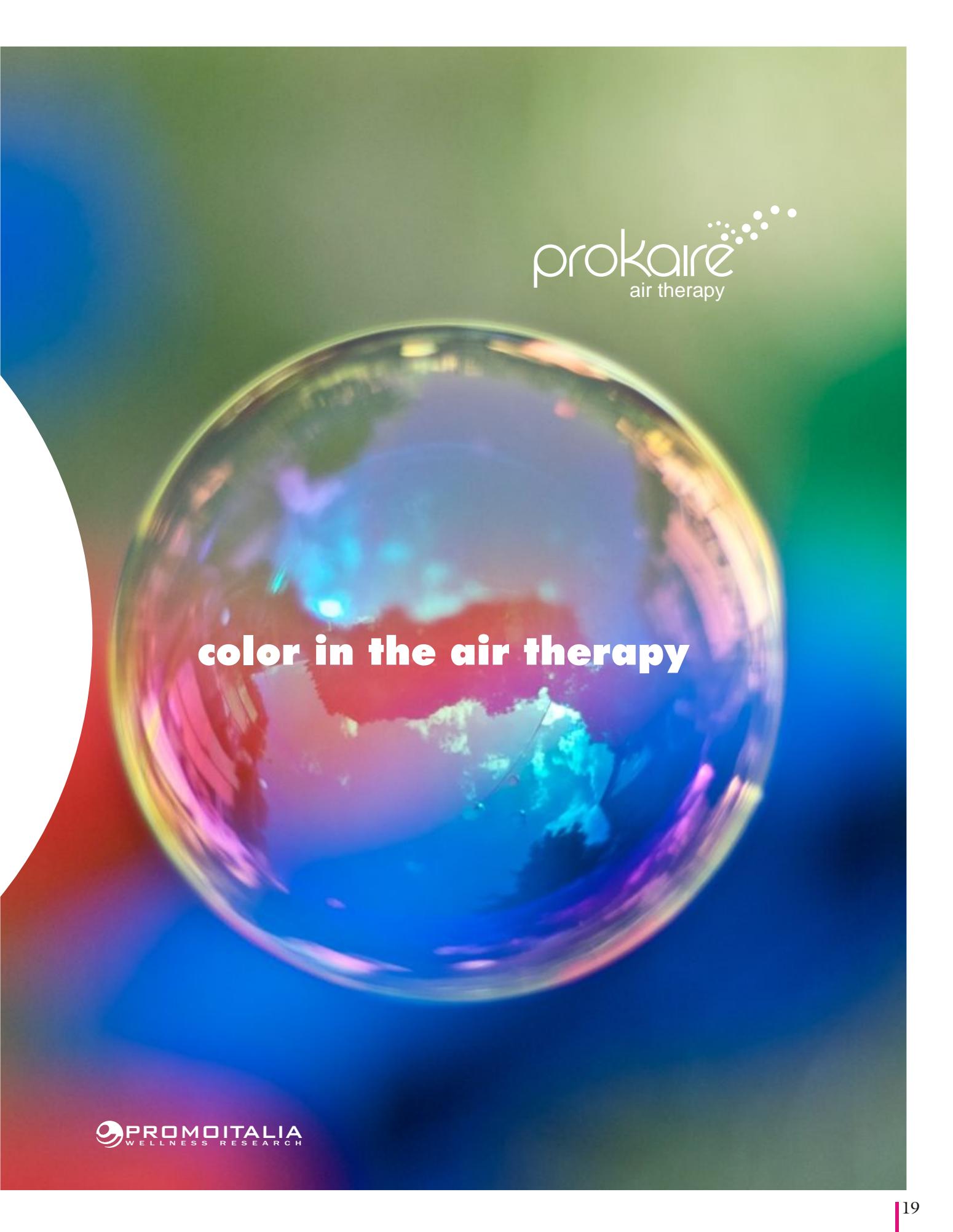

**prokaire**  
air therapy

**color in the air therapy**

# Aromatherapy in the air therapy

prokaire  
air therapy




PROMOITALIA  
WELLNESS RESEARCH

# Air Flow massage and Aromatherapy

## *Il Massaggio a flusso d'Aria e Aromaterapia*

The well-known effects of Aromatherapy are increased and highlighted by nebulization through the air flow massage, variously modulated, that realize a complete wellness for the 5 five senses of the human being.

*I ben noti effetti dell'Aromaterapia vengono incrementati ed evidenziati dalla nebulizzazione mediante il massaggio a flusso d'aria, variamente modulabili, che realizzano così un benessere a tutto campo per i 5 cinque sensi dell'Essere Umano.*

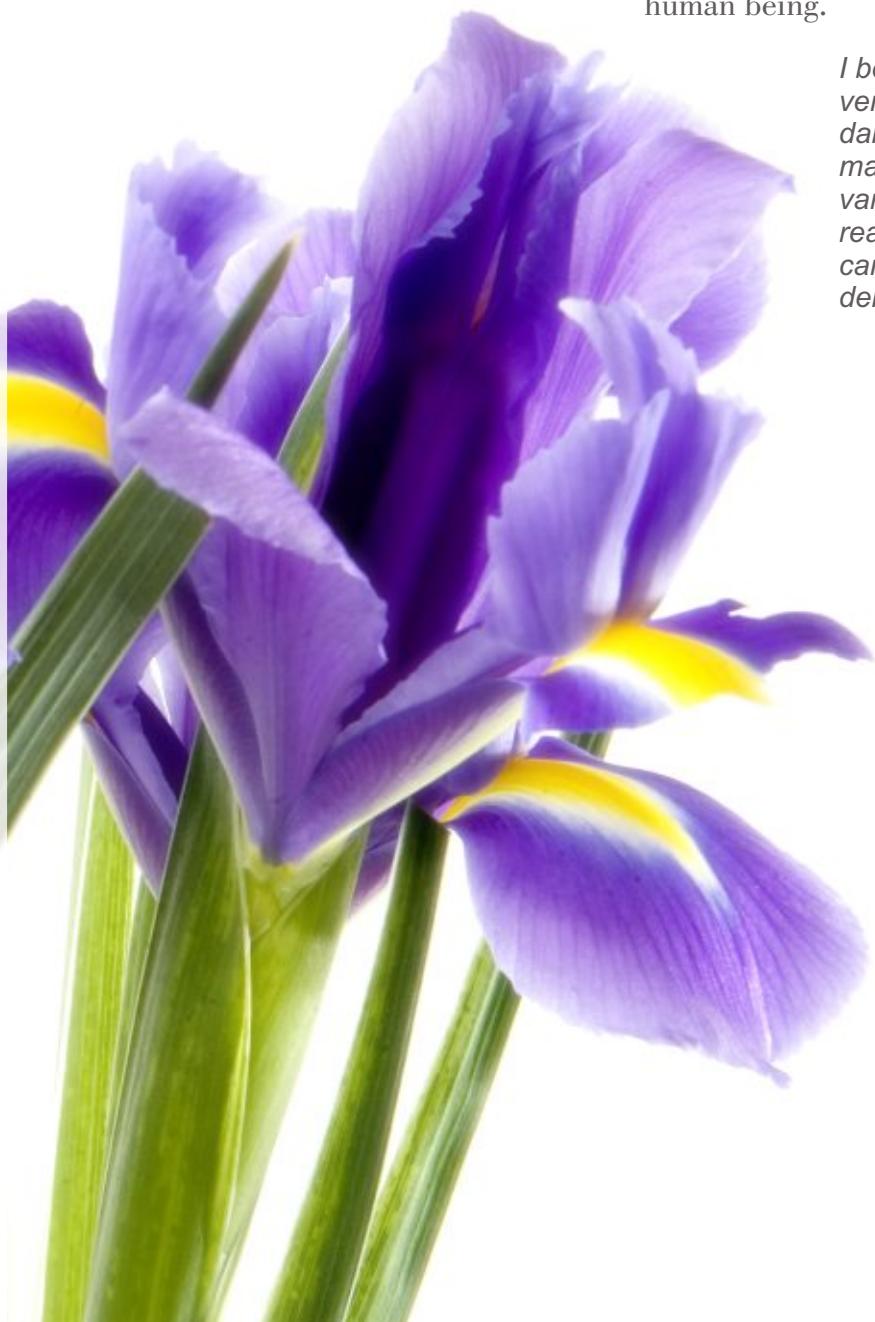

# Air flow massage and Music therapy

*Il Massaggio a flusso d'Aria e Musicoterapia*

Musicotherapy with Infrasounds  
The stimulation of the cerebral waves  
Alpha, Delta, Gamma and Theta  
produced by the infrasound music  
transmitted by Prokaire in combination  
with the air flow massage at different  
rhythms and sequences, is able to  
enhance the relaxing and calming effect  
generated by Prokaire, being able to  
calm any anxious state.

*Musicoterapia con Infrasuoni*  
*La stimolazione delle onde cerebrali*  
*Alfa, Delta, Gamma e Theta prodotta*  
*dalle musiche ad Infrasuoni trasmesse*  
*dalla Prokaire sempre in combinazione*  
*con il massaggio a flusso d'aria a diverse*  
*ritmi e frequenze è in grado di potenziare*  
*l'effetto rilassante e calmante generato da*  
*Prokaire, riuscendo ad attenuare*  
*qualunque stato ansioso.*

**prokare**  
air therapy

music  
in the air therapy



 **PROMOITALIA**  
WELLNESS RESEARCH





# prokaire the probe

Prokaire gives the possibility, thanks to the presence of a special probe, to increase on specific localized areas, the effects of the device.

The Prokaire probe, with the semblance of a shower head, has the following technical characteristics:

Generation of a vacuum effect

Production of low frequency

Nebulization

Allowing in this manner to function efficiently in a localized manner on:

Cellulite beauty flaws

Cutaneous relaxations

Falling skin

Circular stagnates

***Prokaire dà la possibilità, grazie alla presenza di uno speciale manipolo, di incrementare su aree localizzate specifiche, gli effetti dell'apparecchiatura.***

***Il manipolo Prokaire, dalla sembianza di un manico di una doccetta, presenta le seguenti caratteristiche tecniche:***

***Generazione di effetto vacuum***

***Produzione di Low Frequency***

***Nebulizzazione***

***Permettendo così di agire efficacemente e ribadiamo ancora una volta, in maniera localizzata su:***

***Inestetismi della Cellulite***

***Rilassamenti cutanei***

***Edemi declivi***

***Ristagni circolatori***



**prokaire**  
air therapy

# Massage with the Prokaire Probe Air and Nebulization

*Massaggio con Manipolo Prokaire  
Aria e Nebulizzazione*

The Prokaire Probe always works on the body with the use of the air flow, during the phase of aspiration and decompression, obtaining the sensation of a warm, draining and wrapping wave.


The warmth released may work contemporaneously with the nebulized substances, the heat bath and aromatherapy.

***Il Manipolo Prokaire agisce sul corpo sempre con l'utilizzo del flusso d'aria, in fase di aspirazione e di decompressione, procurando una sensazione di onda tiepida avvolgente e drenante.***

***Il tepore rilasciato può agire contemporaneamente con le sostanze nebulizzate, il bagno di vapore e l'aromaterapia.***

# Massage with the Prokaire Probe Oriental Air and Medicine

*Massaggio con Manipolo Prokaire  
Aria e Medicina Orientale*

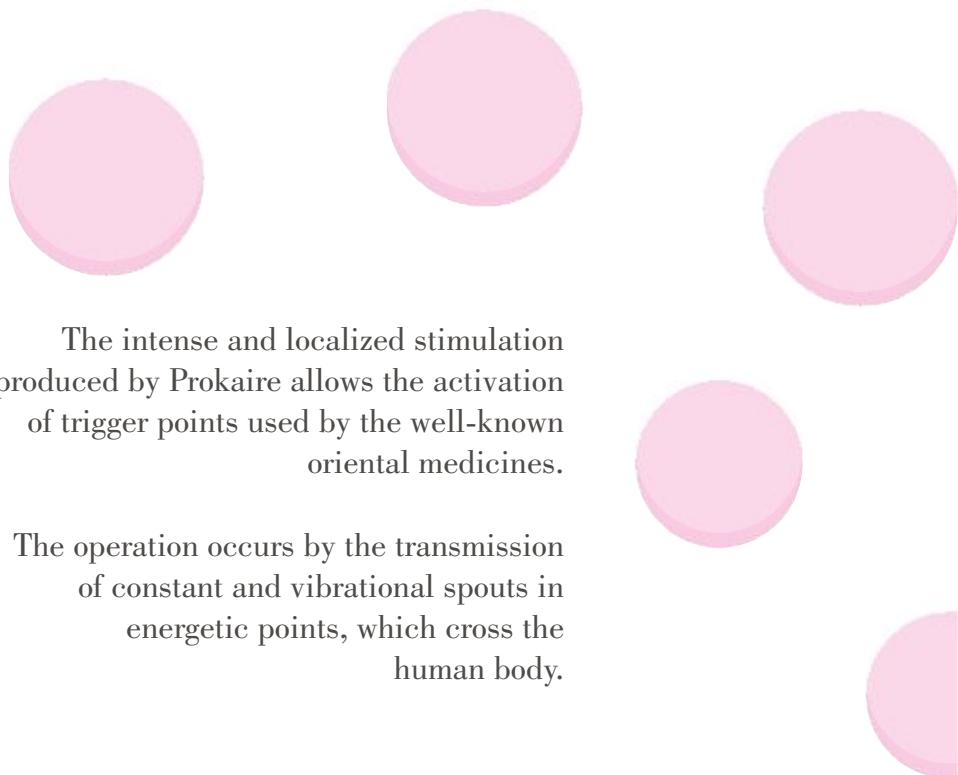

The intense and localized stimulation produced by Prokaire allows the activation of trigger points used by the well-known oriental medicines.

The operation occurs by the transmission of constant and vibrational sprouts in energetic points, which cross the human body.

*La stimolazione intensa e localizzata prodotta dalla Prokaire consente l'attivazione di **punti trigger** utilizzata dalle ben note medicine orientali.*

*L'operazione avviene con la trasmissione di **getti costanti e di vibrazioni in punti o nodi energetici, che attraversano il corpo umano.***



frequency energy in the air




 PROMO ITALIA  
WELLNESS RESEARCH



prokare  
*air therapy*



# wellness programs & essential oils

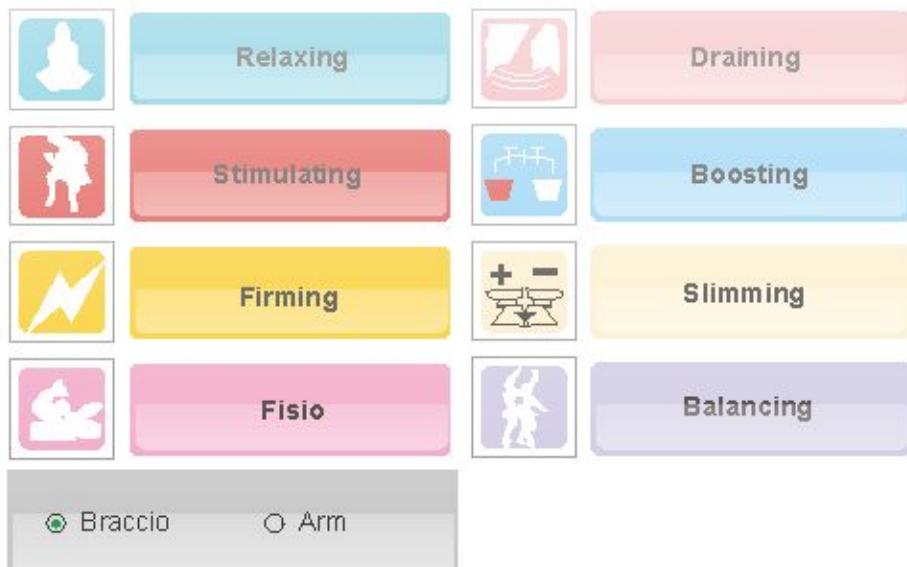

# Relaxing for a complete anti-stress effect

## LAVANDER

It has a peculiar sweet, balsamic, herbaceous fragrance, with flower and wood backgrounds. Lavender has soothing, tonic and refreshing effect. It is an extraordinary body and mind refresher, as it helps to fight depression and restore one's inner balance. It also acts on the nervous system by giving strength and vitality.

## Stimulating to help blood circulation

## ROSEMARY

Stimulates concentration, the ability to be open to the new, invites to act and strengthen one's character. Useful to those blocked by the fear of their own emotions or thoughts, to those who don't have much self-esteem and fear challenges and changes. Indicated particularly during stress periods that precede exams or tests in which one is supposed to react without hesitating.

## Firming to improve skin quality and firm tissues

## GRAPEFRUIT

Calm and persuasive, but at the same time fresh and lively, the grapefruit establishes the traditional refuge for those who have partially lost the reins of their life. Its psychic action is that of a determined teacher that regulates moods and the balances from the origin

## Fisio to let out every day stress

## LEMONGRASS

Fresh and sparkling but sweet at the same time, fulsome and persistant, allows our body to reduce our defences magically finding a sense of peace.



## Draining

for a drainage and purifying effect

### JUNIPER

Has the strength of the sun, of the rocks, the earth, and the will to expand. It favours the will to live, organic resistance, trust in oneself, mental clearness, interior strength, association capacity. Its an ingredient available in many mixtures against cellulite.


## Boosting

to charge up with energy

### MINT

riggers and motivates, mint stimulates everything that tends to doze off in us. It leads us away from negative thoughts and depression (not pathological) giving us optimism and predisposition towards the future and towards the next.

Slimming: Thermo-genesis & Lipolysis for the slimming of excess fat

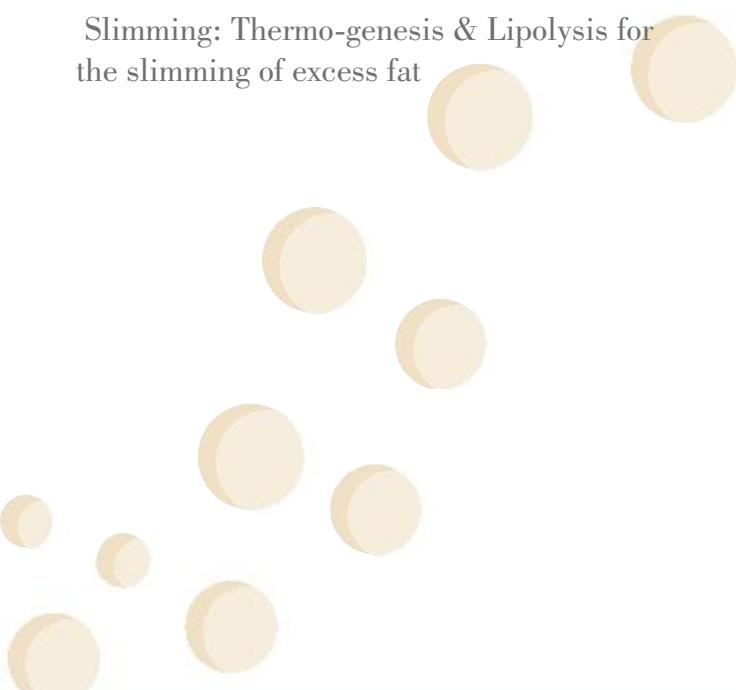

## Cleaning programs

- Only with distilled water, at the end of every session if Prokaire works with different essential oils,
- Or at the end of the day if Prokaire works all time with the same essential oil.



## Slimming

Thermo-genesis  
& Lipolysis for the  
slimming of excess fat

### MANDARIN

Its an aroma that brightens the spaces in which it is diffused, lightens heaviness, refreshes and softens. It's an invitation to delicacy, to naturalness, to tollerance. Useful for depressed subjects and for those who take everything too serious.

## Balancing

to re-establish harmony and  
balance with one's body

### MELISSA

This essential oil is one of the most important for strengthening the immune system debilitated by fatigue and stress. It's a good regulator of the imbalances of the hormone system and helps to find the sense of life, that is lost when a profound alteration occurs.



# 5 SENSES

Enjoy your beauty

## OLFACTION

It's a very direct sense, even more than the first: olfaction is almost an unconditional reflex, from which the importance of aromatizing and environment is intuited; if we do this the right way, our visitor will allow his/her self to breath profoundly (breathing is a symbol of life), that with the right rhythm, has the ability to release tension.


**Prokaire** takes wellness out of what you smell

## VIEW

It's a direct sense of high speed; the images seem to be photographed and then projected in our brain through the eye, which has the ability to decompose and absorbe them.

The coloured lights that give forth and a sense of harmony and tranquillity.

**Prokaire** takes wellness out of **what you see**.

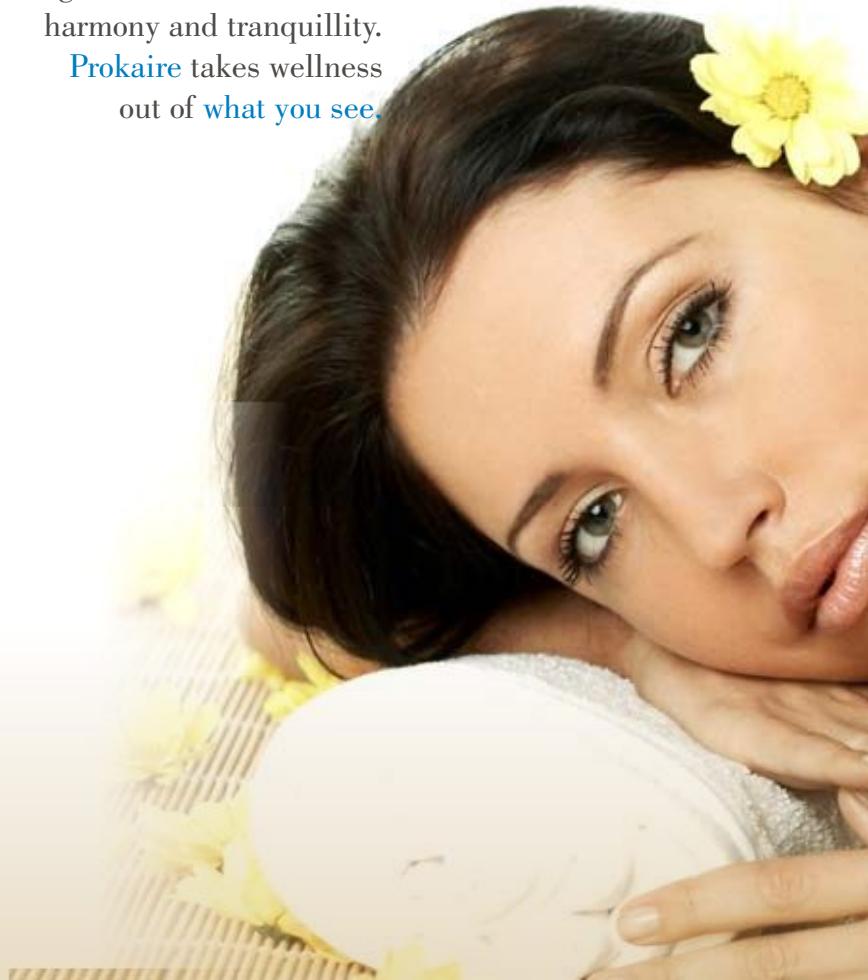

## TACT

It's an indirect sense, meaning that we perceive in the moment in which we touch a surface; we feel like trying a tactile experience with our body, that gives us new and refresher sensations.

Imagine lying on a comfortable bed and feel immersed by the air, that has a sequential and alternate rhythm of warm and cold.

**Prokaire** takes wellness out **of what you touch**

## TASTE


It's a sense that becomes direct when stimulated, for example when tasting something. In this way, we involve our client, inviting him/her, after a session of Prokaire, to drink some hot or cold herb tea.

**Prokaire** takes wellness out of **what you taste**

## HEARING

It's a direct sense; at times it isn't as immediate as our sight because we prefer to pay attention to the million thoughts that wander in our head, rather than to what comes from the outside.

The ideal thing to do would be to privilege background music that contains a soft melody that cradles our thoughts and conducts our mind into a state of harmony  
**Prokaire** takes wellness out of **what you hear.**

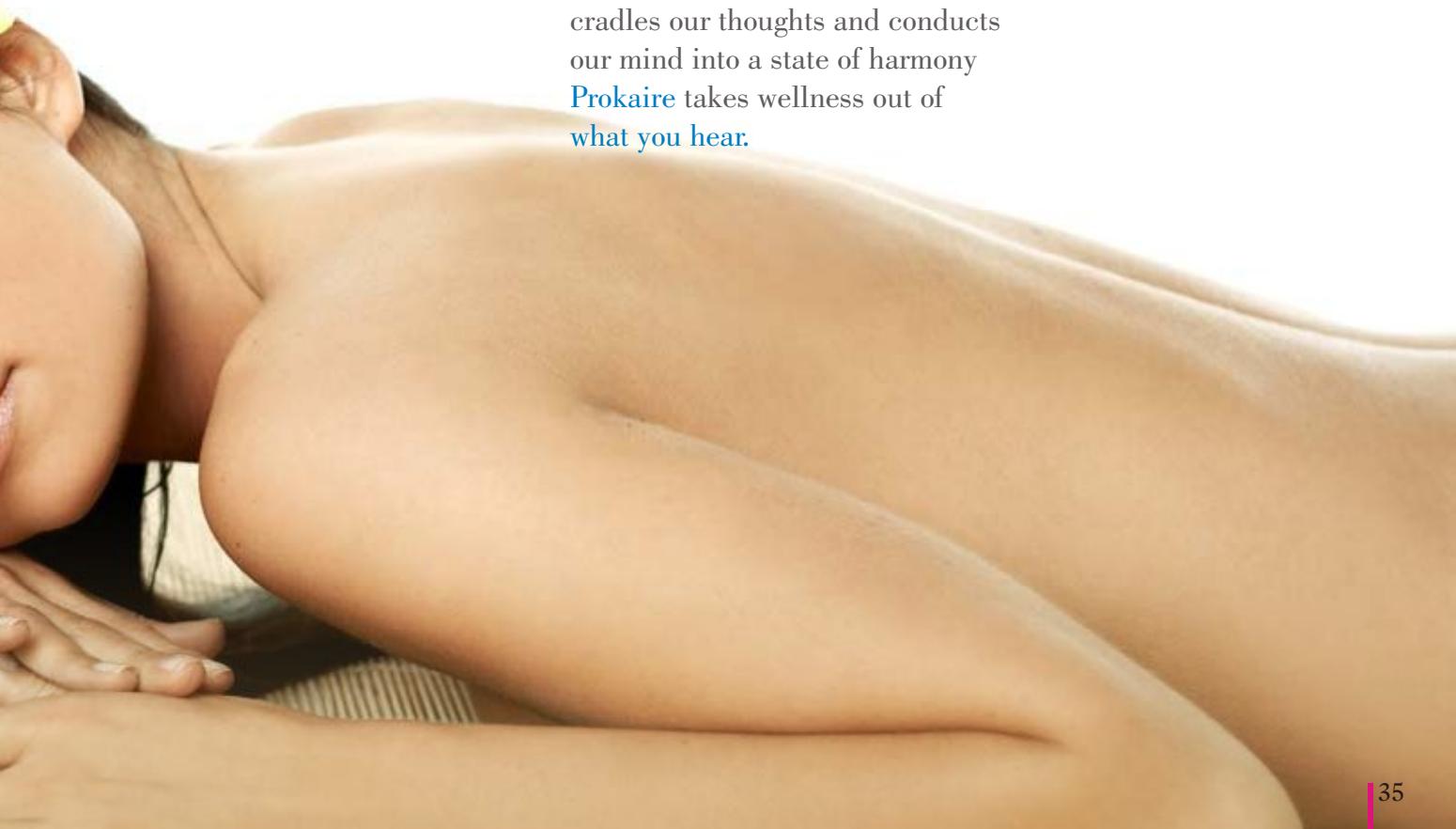

A close-up photograph of a single, vibrant red poppy flower. The flower is positioned in the lower half of the frame, facing slightly to the right. It is set against a clear, bright blue sky with a few wispy white clouds visible at the bottom left. In the foreground, the tops of green grass blades and small yellow flowers are visible, suggesting a field setting.

prokare  
air therapy

*ProKaire, the new key of air evolution, is the latest patented innovation from Promoitalia that combines the benefits of various elements: air, temperature, trans-dermal transmission of specific ingredients, lights, colours, aromas, essential oils, sounds and music.*

## Essential oils

ProKaire is indicated for the wellness market, of the spa and for aesthetics. Its different programs have been Studied and tested to satisfy the patients different needs.

Promoitalia has always been committed to researching and commercializing high quality Essential Oils. Over 80% of our essential oils come from biologic cultivations, controlled and certified by ECOCERT e by plants from uncontaminated cultivations.

Promoitalia essential oils line is composed by 100% Natural oils, distilled by vapour or by squeezing out at cold, lacking of whatever synthetic component, of cutting oil, alcohol, colourings, of peroxide and aren't determinated. All of the essential oils commercialized are accompanied by certificates of complete origin. Our objective is to guarantee the maximum quality and freshness.

## How Prokaire works

- ProKaire isn't operator dependent and is equipped with versatile programs in order to satisfy various needs.
- During the session, ProKaire's automatic arm is never directly in contact with the skin making the session completely comfortable and hygienic.
- While treating the patient, Kaire's automatic arm, acting on the areas to treat, works with its 300 rhythmic air sprays, exercising microcompression controlled by a software.
- Prokaire is also equipped with an independent probe that can be used for a massage, focusing on a specific area to treat ad hoc.

The device is equipped with a complete software and easy to use software and of easy use with 8 different programs, each one with a typical indication.

The air is vaporized on the treatment area in a sequential and rhythmic way.

The different modalities (different rhythms and power) are used to obtain and solicit different pleasant sensations.

The air is vaporized at different controllable temperatures.

The air is vaporized with alternating warm / cold temperatures.

The aero-therapy stimulates and contemporaneously vaporizes products for a trans-dermal effect.

## ProKaire- keywords

- The key of the air evolution in the world for wellness and aesthetics
- 100% non-invasive technology
  - Ergonomic Design
- Practical Use / Non operator dependent
- Automatic ergonomic arm with 300 spraying jets



## specifications

Bang area emission **1150 sq. Centimeters**

Balsam solution per treatment **20 milliliters**

Touch screen monitor **10 inches**

Treatment **8 programs**

Duration of the treatment **20 minutes**

Bang administration **5 rhythms**

Chromatic band **7 colors**

Nebulization **5 levels**

Hot air emission **1 level**

Eurhythmic emission **2 loudspeakers + 1 headphone**

Particular treatments **1 probe**

Composition of the probe **3 series of concentric nozzles**

Special effects probeInfrasounds of **10/50 Hz**

Power **220 V 50 Hz**

Maximum Power absorbed **1500 W**

Compressor cooling **Forced air coil**

Compressed air cooling **Forced air coil**

Height; compressed wheels **127 centimeters**

Width; diameter **57 centimeters**

V extension balance wheel **25 centimeters**

Arm extension **90 centimeters**


Arm movement angle **60°**

Bar Bang groups **5 + 5 + 5**

Total number of Bang bars **15**

Number of nozzles on each Bang bar **20**

Total number of Bang nozzles **300**

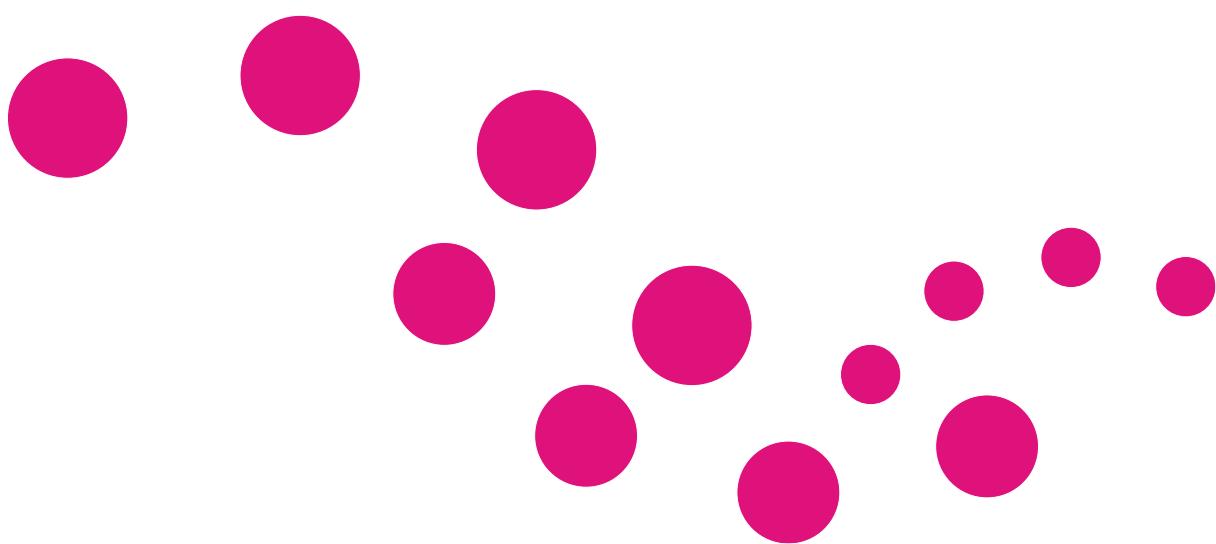



PROMOITALIA  
WELLNESS RESEARCH